

Pain®Gone

paingone

Acupuncture Guide

EE

Akupunktuur juhised  
Kliiniliselt testitud.

Uurimused on näidanud, et stimuleerivaid seadmeid nagu Pain®Gone, saab kasutada mitteinvasiivseks akupunktuuriks. Palume järgida lihtsat juhist, et leida üles oma seisundile vastavad kehapunktid. Mõjutades seisundit, millele on pakutud enam kui 3 erinevat punkti, soovitame alustada 3 esimese punkti mõjutamist Pain®Gone seadmega. Kui tulemus ei ole rahuldav, varieerida punkte kuni leiata endale sobilikku kombinatsiooni. Kliki 20-30 korda igal akupunktil mida soovite mõjutada.


Kui soovite migreeni või peavalu leevendada, peate stimuleerima valutava kehapoole vastaspoolt. Kui peavalu või migreen on pea paremal poolel, peaksite stimuleerima oma keha vasakut poolt, näiteks vasakut kätt või vasakut jalga.

Tootja:











Medi-Direct International Ltd, Inglismaa.

Importija ja levitaja: Startlan OÜ, Laki 30, Tallinn

©Autoriõigused kaitstud 2016, Medi-Direct International Ltd. Kõik õigused kaitstud. Patenteeritud.

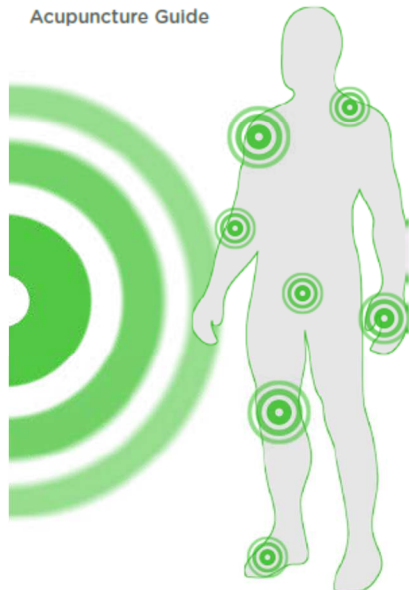

Clinically tested

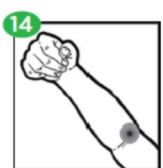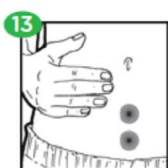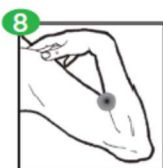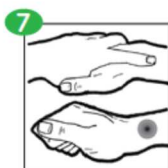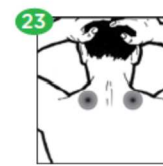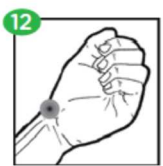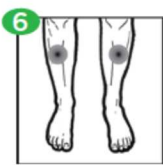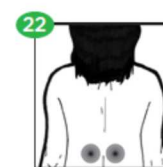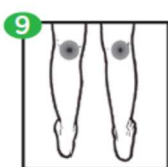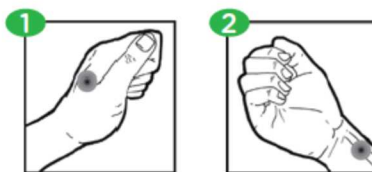

Näidustuste ülevaade  
Akupunktid

**Pea**

-Peavigastus või valu: 8,3,7,6,2,10,1,11,20,23

-Peavalu:

üldine: 1,3,7,4,6,2,10,11,19,20

migrään: 1,7,12

-Kurk: 10,3,14,1,7,12

-Hambavalu: 4,1,18,21

-Kõrvad: 3,1

**Keha**

- (Õised) jalakrambid: 4

-Rind: 3,2,1,7

-Kõht

ülakõht: 5,6

alapakõht: 9,5,6,2,19

-Munasarjad ja emakas: 8,13,5,6

-Kubemesong: 5,6,19

-Ishias ehk istmikunärvivalu: 9,4,5,6,24,22

-Lihaskrambid: 25,26

-Kopsud: 7

-Kõht: 8,5,6,2

-Menstruaalvalu: 13,5,2,15,26,19

-Kael: 8,1,7,16,17,26,23

-Seljavalu:

üldine: 9,4,5,6,17,20,22,23

ülaselg: 17,22,23,9,4

alaselg: 5,5,6,20

-Lihavalu, mis tekkinud ülekoormusest,  
nihestusest, väänamisest: 4

-Lumbaago ehk nimmevalu: 9,4,5,6,14,1,7,24

-Munandid: 4,5,6

-Kuseteed/genitaalid: 13,25,26,19

-Kaelavalu ehk *whiplash*-sündroom: 8,4,1,7

-Neuralgia ehk närvivalu: 4

**Käed ja jalad**

-Käed: 8,3,2,12,17,23

-Artriit/artroos, podagraal: kasuta Pain®Gone  
seadet otse valutaval kohal

-Jalad: 9,4,5,6

-Reied: 9

-Küünarnukid: 8,3,2,14,1,23

-Pahklud: 4,5,6,1,25,18,19,20

-Käelabad: 3,2,10,1,12

-Puusad: 4,5,6

-Põlved: 9

-Kaenlaalused: 2,12

-Küünarvars: 8,2,10,1,12

-Ranne: 7,3,12

-Õlad: 8,3,2,14,1,7,17,26

-Sõrmed: 10,3,2,1,12

-Jalalaba: 4,5,6,1,25,18,19,20